

LaVapor® LD 21 *Laveur Désinfecteur*



Caractéristiques:

- Ouverture et fermeture de la porte complètement automatique;
- Vidage automatique des bassins de lit ;
- Écran tactile couleur facile à apprendre;
- Lavage à l'eau froide et chaude, suivie par une désinfection thermique par la vapeur;
- Grand capacité de lavage;
- Prélavage des ustensiles disponible;
- Le commande et contrôle des cycles par le micro-ordinateur;
- Pompe de dosage de détergent;
- Système de sécurité de la porte, contre l'interposition d'objets dans le mouvement de fermeture de la porte;
- Système d'économie de l'eau et de l'énergie;
- Deux portes (en option);
- Systeme de sechage;
- Entièrement construit en acier inox AISI 304, sans ajout de matériaux ferreux;
- Préviens les infections croisées, puisque le commande de l'équipement peut être accompli par le pédale pneumatique, en alternative au commande sur le tableau de bord.
- système de sechage à air chaud, avec filtre HEPA (en option);


Accessories:

- Support universelle pour deux bassin de lit • 3 Supports pour urinal ou bocal • Accessoire breveté pour vider, laver et désinfecter les sacs d'urine • Soutien pour les cuvettes
- Panier pour laver et désinfecter les ustensiles • Pompe de dosage pour le séchant • Accessoire breveté pour vider, laver et désinfecter les sacs d'urine
- Roues pour le facile déplacement du laveur désinfecteur.

CERTIFICATION: Conforme aux Directives et Normes • Directive 93/42/CE • Directive 2007/27/CE • Norme EN ISO 15883 - 1 - 3 • CE0120

LaVapor LD21 lave et désinfecte à chaque cycle le suivant:

Item	Quantité	Option 1	Option 2	Option 3
Bassin de lit	2	v	-	-
Urinal ou Bocal	3	v	v	-
Sac d'urine	1	v	v	-
Cuvette ou Cupule	1	-	v	-
Panier ustensiles	1	-	-	v

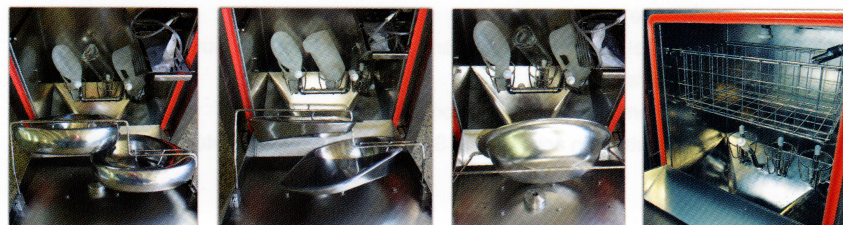

Programmes:

- Lavage d'Urinal / bocal
- Normale
- Économique
- Intensive

Modèles

Volume de la chambre (l)

Dimensions extérieures (cm)
(Larg. x Haut. x Prof.)

Lavapor LD 21

90

70 x 150 x 60

LaVapor® LD 21

Laveur Désinfecteur

