

COMINOX. PURE STERILIZATION



Catalogue 2017

Gamme Autoclaves SterilClave

TECHNIC LABO® SAS

24, Allée de Verdun
69500 BRON

www.techniclabo.com



Les autoclaves **SterilClave®** répondent à toutes les exigences d'une stérilisation professionnelle : composée de modèles de différentes capacités de charge, tous les autoclaves renferment les plus **hautes technologies** conformément aux dernières techniques et normes réglementaires grâce à **l'expérience** de Cominox, fabricant depuis 32 ans.

Les autoclaves SterilClave de Cominox permettent à l'utilisateur de réaliser **la stérilisation** de tous les types d'instruments, solides, creux ou poreux, conditionnés ou non, au moyen de cycles utilisant le vide fractionné supervisé par un système électronique de contrôle du processus de la stérilisation. L'écran de **grandes dimensions** permet une utilisation **intuitive** et

facile. La **traçabilité** des cycles est assurée par une inspection électronique permanente et par différents équipements accessoires pour assurer une sécurité maximum pendant le déroulement des cycles.

Le service par COMINOX

Parce que la qualité du service après-vente de votre autoclave est primordiale, COMINOX France s'est organisée afin de répondre à toutes les exigences.

Composé d'une équipe d'une quinzaine de techniciens formés et répartis sur toute la France, le service est ainsi rapide et effectué par de vrais professionnels de la stérilisation.

Sur toute la France, par nos techniciens :

- Livraison, installation et mise en service
- Formation à l'utilisation
- Maintenance curative
- Maintenance préventive
 - Contrats de maintenance
 - Jusqu'à 5 ans de garantie

Un seul numéro d'assistance : 01 73 01 90 80

COMINOX France - Catalogue 2017



Les autoclaves COMINOX
L'achat malin

Crédit-bail à taux privilégiés !

Pensez à demander les offres de crédit-baux avec notre partenaire **MEDIDAN-EUROLOCATIQUE**.

Formule locative tout compris !

Des formules locatives sur 60 mois sont disponibles comprenant le matériel et toute la maintenance. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations.

L'utilisation de matériaux de qualité

Inox

Les autoclaves COMINOX sont fabriqués avec la plus attention et l'utilisation de l'INOX dans les moindres détails :

- Cuve en acier INOX AISI – Garantie 10 ans
- Réservoirs d'eau 100 % en acier INOX pour éviter le développement de micro-organismes

L'exigence des choix de composants



COMINOX s'astreint de conserver ses fournisseurs historiques avec lesquels la confiance dure depuis plusieurs années et dont la sélection s'appuie sur des critères de haute qualité. Ainsi COMINOX bénéficie d'une parfaite maîtrise de sa ligne de production et s'assure ainsi de la fiabilité de ses produits.

Une grande rigueur des contrôles



Les contrôles qualité sont primordiaux pour COMINOX. L'usine est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 et tous les appareils sont vérifiés sur un banc de test à l'issue de leur fabrication. La mise en place de ces procédures ont permis la certification par l'IMQ des autoclaves à la norme EN13060.


Simplicité d'utilisation



Parce qu'il est important d'avoir une accessibilité simple et un accès intuitif à l'ensemble des fonctions des autoclaves SterilClave, COMINOX a choisi d'utiliser un grand écran LCD rétro éclairé et un pilotage par MENU intuitif déroulant. Plusieurs modes programmables offrent différents niveaux d'utilisation (Opérateur avec fonctions d'utilisation limitées) permettant ainsi de simplifier l'utilisation et renforcer la traçabilité.

COMINOX France – Catalogue 2017

Performances

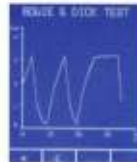

COMINOX attache une importance particulière aux performances de ses appareils. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe et maîtrisées par ses ingénieurs, COMINOX dépose ainsi régulièrement des brevets faisant bénéficier les utilisateurs des autoclaves SterilClave des toutes dernières technologies.

Un large choix d'accessoires



De nombreuses possibilités s'offrent aux utilisateurs des autoclaves COMINOX pour faciliter l'utilisation des autoclaves SterilClave au quotidien.



COMPACT l'autoclave SterilClave dispose des mêmes fonctionnalités que les plus grands

Large écran LCD – Facile d'utilisation grâce à des menus déroulants

Cycle programmable par l'utilisateur
Enregistrement des utilisateurs avec limitation des fonctionnalités

Départ différé programmable
Fermeture et déverrouillage de porte automatiques et mécanisées

PRATIQUE et SÉCURISANT : le chargement d'eau (manuel, aspiration ou **déminéralisateur associé**). La qualité d'eau est contrôlée à chaque instant... pour la **pérennité d'utilisation** de votre autoclave.

Un chargement maximum



Support réversible
Pour 3 casseroles

5 Plateaux de série



TRACABILITÉ : SterilClave vous la rend FACILE

Carte SD de série pour l'enregistrement de toutes les informations de l'autoclave.
Copie des données via le **port USB** situé en façade pour **sauvegarde sur PC**.
Gestion des données PC sur le logiciel **COMINOX Reader** (livré de série)
Imprimante à étiquettes **code-barres** optionnelle.

	Couleur		Gestion de l'eau			Traçabilité		
	Blanc	Violet	Remplissage Eau propre	Vidange Eau sale	Déminéralisateur ou osmoseur associé	Cartes mémoire SD Logiciel dédié Cominox Reader	Étiquettes Code-barres	Connexion au réseau
SterilClave 18 B / 24 B	Blanc		Manuel	Manuelle	-	•	○	-
SterilClave 18 BHD / 24 BHD		Au choix	Manuel ou aspiration automatique	Manuelle ou auto.	○	•	○	○

COMINOX France – Catalogue 2017

• De série ○ En Option - Indisponible

SterilClave 18 B.....	 TECHNIC[®] LABO À votre service depuis 1988
SterilClave 18 BHD.....	
SterilClave 24 B.....	
SterilClave 24 BHD.....	



COMINOX France - Catalogue 2017

	U.M	STERILCLAVE 18-24 B	STERILCLAVE 18-24 BHD
Support pour 5 plateaux ou 3 boîtes		+	+
Plateaux livrés de série		5	5
Cycles de stérilisation			
Type de cycle		Type B, 6 cycles, Test de vide, Cycle test SBD / Hvac	
Temps de cycle total (Cycle PRIONS – Pleine charge - Séchage inclus – Environnement ventilé – T°C ambiante 21°C)	min	75 (18) – 70 (24)	85 (18) – 70 (24)
Poids maximum total de la charge admise			
Instruments solides non emballés	kg	5,5 (18) - 7,5 (24)	5 (18) - 7,5 (24)
Instruments solides emballés	kg	3 (18) - 4 (24)	3 (18) - 4 (24)
Capacité de la cuve	l	17,15 (18) – 23,15 (24)	17,15 (18) – 23,15 (24)
Capacité des réservoirs eaux propres / eaux usées	l	2,1 (18) - 3,1 (24)	2,1 (18) - 3,1 (24)
Contrôle qualité de l'eau		-	Chap par conductivité
Consommation d'eau par cycle (minimum - maximum)	cm ³	215 – 788 (18) 420 – 1190 (24)	
Puissance maximum absorbée	W	2500 (18) – 2895 (24)	
Niveau sonore mesuré sur les postes de travail, dans des locaux appropriés (moyen - crête)	dB(A) - dB(C)	65,7 / 62,7 (18) 68 / 63 (24)	
Dimensions hors-tout L x H x P	mm	445 x 390 x 640 (18) 445 x 670 x 700 (24)	
Dim. d'encastrement – Plan de travail L x H x P	mm	450 x 395 x 560 (18) 450 x 465 x 600 (24)	
Poids (masse)	kg	49 (18) – 66 (24)	51 (18) – 68 (24)
Altitude maximum admise avec soupape de sécurité standard	m a.s.l.	1500 (2000 après remplacement de la soupape)	
Garantie (au premier des 2 termes échus)		2 ans ou 1500 cycles	

Gestion de l'eau



SPEEDYWATER est la solution idéale pour l'alimentation automatique de l'autoclave simplifiant la manipulation de chargement en eau.

Une fois connecté, le déminéralisateur **SpeedyWater** se charge de remplir automatiquement les autoclaves SterilClave, sans intervention des opérateurs.

Le déminéralisateur est fait d'une double cartouche de résine échangeuse d'ions filtrant **automatiquement** l'eau du réseau. Son installation, sa liaison à l'autoclave et le remplacement de sa cartouche sont très **faciles**. Seul un robinet de type « machine à laver » 20/27 mm est nécessaire pour alimenter SpeedyWater.

SpeedyWater – Réf. DEMIN004
620,00 € TTC

DISCOM est un **distillateur indépendant** permettant la production d'une **eau de grande qualité** assurant ainsi une stérilisation efficace. Son design attrayant est combiné à une très bonne **ergonomie** : DISCOM est très maniable grâce à son faible poids. Il s'entretient simplement et est équipé de fonctions très utiles, rendant son **utilisation facile**, telle que la coupure automatique en fin de cycle. Le réservoir d'eau de 4 litres est fourni de série.

DISCOM – Réf. DISCOM
240,00 € TTC



COMINOX France - Catalogue 2017

Traçabilité

COMINOX READER est un logiciel permettant de transférer facilement les données des cycles de stérilisation réalisés sur les autoclaves SterilClave sur le disque-dur d'un PC :



c'est le système idéal pour garder **sous-contrôle** toute sa traçabilité. Avec COMINOXREADER, les opérations de maintenance de l'autoclave peuvent aussi être enregistrées et archivées et chaque détail peut être imprimé.

Cominox Reader

Livré de série avec les autoclaves SterilClave

STERILABEL est une imprimante permettant d'indiquer sur les conditionnements de stérilisation les données du cycle pour faciliter la **traçabilité du processus** de stérilisation, tout en simplicité.



Un **code-barres** peut aussi être imprimé, indiquant le **lot concerné** par le conditionnement et pouvant être lu ultérieurement par un lecteur type douchette.

SteriLabel - Réf. STLABEL

465,00 € TTC

COMINOX WIZARD est un logiciel permettant de suivre l'évolution des cycles de stérilisation sur les autoclaves. Un PC peut être connecté simultanément à un ou plusieurs stérilisateur **via le réseau du cabinet** et leur évolution peut être **vérifiée à tout moment**, indiquant tous les paramètres et dessinant un graphe du cycle. Toutes les données peuvent être visualisées et imprimées à tout moment.



Cominox Wizard - Réf. KITWIZARD

380,00 € TTC

Le **lecteur code-barres** permet de scanner les numéros de lots imprimés par l'imprimante **SteriLabel** et de les insérer dans l'onglet prévu à cet effet dans le logiciel de patientèle du cabinet.



Ainsi l'opérateur **retrouvera facilement les informations du cycle** en rapport aux instruments utilisés lors des soins. Filaire, sur demande particulière, un lecteur Bluetooth ou Wi-Fi peut être adapté.

Lecteur code-barres filaire - Réf. DFU

190,00 € TTC

COMINOX France - Catalogue 2017



Solyclave® sas - 32, rue du Château d'Eau - 69720 Saint Laurent de Mure - France

RCS Lyon n° 824 513 873 00011 - NAF : 4646Z - TVA n° FR 18 824513873

Téléphone : 04 78 67 34 05 - Fax : 04 72 37 13 27 - gestion@solyclave.com